

HemoCue® Hb 201⁺ Rendszer



A kompromisszumok nélküli pontosság szabványa

Hb 201⁺

A HemoCue® Hb 201+ rendszer laboratóriumi pontosságot és egyszerű használatot biztosít, így a Hb-pontos vizsgálatban a Hb Point-of-Care vizsgálat standardjává vált. Az egészségügyi szolgáltatók világszerte az azonnali eredményekre támaszkodnak, hogy a megfelelő döntéseket akkor hozhassák meg, amikor a leginkább szükség van rá - közvetlenül az ellátás helyén.

Az elkötelezett támogatással és szervizzel, valamint a több, mint 40 éves tapasztalaton alapuló egyedülálló képzéssel és oktatással a HemoCue-ra számíthat a minden igényt kielégítő megoldások tekintetében.

Legyen meggyőződve a válaszait illetően az ellátás helyén.

- Gyári kalibrálás az ICSH által ajánlott referencia-módszerrel.
- Mikroküvetés technológia kiváló tételenkénti reprodukálhatósággal
- Dátum és idő tárolása akár 600 eredményhez
- Véralapú folyékony kontrollok állnak rendelkezésre

Könnyedén hozzáférhet a laboratóriumi minőségű pontossághoz

- Kapilláris, vénás vagy artériás teljes vérminta
- Rövid képzés gyakorlatilag karbantartás nélkül
- Az eredmény összekapcsolása a betegazonosítóval az orvosi nyilvántartás integrálásához
- Nyomtató interfész

HemoCue® Hb 201⁺ Rendszer

Specifikációk

Alapelv
Módosított azidemethemoglobin-reakció;
kettős hullámhossz (570 nm és 880 nm) a
zavarosság kompenzálására.

Kalibráció
Gyári kalibrálás az ICSH referenciamódszerrel
szemben; nem igényel további kalibrálást

Minta anyaga
Kapilláris, vénás vagy artériás teljes vér

Mérési tartomány
0.5–25.6 g/dL (5–256 g/L,
0.3–15.9 mmol/L)

Mérési idő
15–60 másodperc

Minta mennyisége
~10 µL

Méret
160 × 85 × 43 mm
(6.30 × 3.35 × 1.69 inches)

Súly
350 g (0.77 pounds) elemekkel együtt

Tárolási hőmérséklet
Analizátor: 0–50 °C (32–122 °F)
Mikroküvetta: 15–30 °C
(59–86 °F);

Működési hőmérséklet
15–30 °C (59–86 °F)


Áramellátás
AC Adapter vagy 4 db AA elem

Interfész


Nyomtató és HemoCue® Basic Connect,
beleértve az opcionális vonalkódolvasót.
Bluetooth® technológiával történő adatátvitel a
HemoCue® BT Connect (tartozék) segítségével
lehetséges.

Minőség-ellenőrzés

Beépített önellenőrzés; opcionális folyékony kontroll

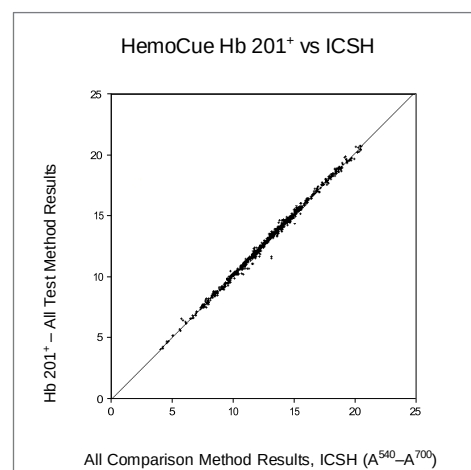


Három egyszerű lépés

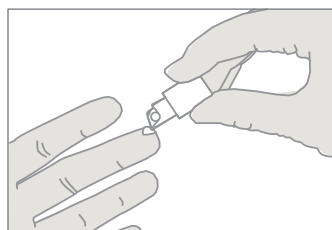

1 Töltse meg a
mikroküvetát.



2 Helyezze a
mikroküvetát az
analizátorba.

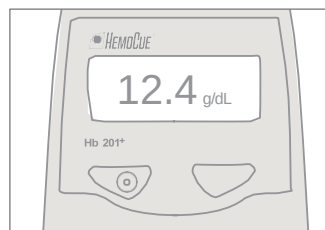

3 Olvassa le az eredményt.